

保証書

家庭用
保証書1年間付

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 商品名 | ブラソニエ エピルーズ Ex α (PD 233) | ■お買上げ店(販売店名・住所・TEL) |
| 保証期間 | 本体：1年 付属消耗部品は適用外 | |
| お買上げ日 | 年 月 日 | |
| お客様 | お名前 | |
| | ご住所 〒 | |
| | TEL - - | |

※包装・仕様等は予告なしに変更する場合があります。

愛情点検



●長年ご使用の電気器具の点検を!

- ご使用の際、このようなことはありませんか？
- スイッチを入れても、ときどき作動しないことがある。
 - コードを動かすと通電したり、しななかりする。
 - 作動中に異常な音や、コグくさいニオイがする。
 - プラグ、コード、本体、アダプターなどが異常に熱い。

ご使用中

故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中自然故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社に修理をご依頼ください。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または発売元にお問い合わせください。

— 発売元 —

ベターライフ株式会社

〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-11-23

Pour-A-soigné Epileuse EX α

PD 233



このたびは『ブラソニエ エピルーズ Exα』を
お買上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を末永く正しく安全にご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになって良く理解し、指示に従ってください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

目次

ご使用前に

| | |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1~4 |
| 仕様/別売品 | 5 |
| セット内容・各部の名前 | 6~7 |


使い方

| | |
|-----------------|-------|
| 脱毛前の準備をしましょう | 8 |
| エピソイザー脱毛—ムダ毛を抜く | 9 |
| 各部位ムダ毛処理のしかた | 10 |
| 効果的なアドバイス | 11 |
| エピパッドの脱毛—ムダ毛を抜く | 12~13 |
| アフターシートで脱毛 | 14~15 |
| 各部位貼りつけ例 | 16 |
| Q&A | 18~19 |

お手入れ保管・保証など

| | |
|-----------------|----|
| 収納する | 17 |
| エピパッドが貼りつきにくいとき | 17 |
| お手入れ方法 | 20 |
| 保証とアフターサービス | 21 |
| 保証書 | 22 |

Pour-A-soigné Epileuse EXα

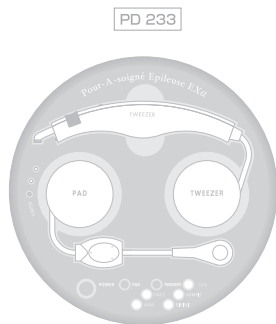

取扱説明書



- 末永くお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みにしてから正しくご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついております。いつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意 ~正しく安全にお使いいただくために~

— ご使用前に、この「安全上のご注意」(1~4ページ)を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 —

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなた自身や他の人々への危害や財産等への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずお読みになって良く理解し、指示に従ってください。

※取扱説明書は本製品を正しく安全にお使いいただくために必要です。本製品を人に貸したり、差し上げるときには必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

●表示と意味については次のとおりです。

| 表示 | 意味 |
|----|---|
| 危険 | 取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。 |
| 警告 | 取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
| 注意 | 取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 *物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。 |

●絵表示の例


| | | |
|-----------|-----------|---|
| (表示例) | (表示例) | は、「危険・警告・注意」を示します。 具体的な注意内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「感電注意」です。 |
| (表示例) | (表示例) | は、「禁止行為」(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「分解禁止」です。 |
| (表示例) | (表示例) | は、「行為の強制・指示」(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「プラグをコンセントから抜く」です。 |

本書に記載されている内容に関し、ご不明点、ご質問等は、お買上げ先または
当社お客様相談室までご遠慮なくお問合せください。

当社お客様相談室 ☎0120-373-426 (9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)
http://www.better-life.co.jp メール: info@better-life.co.jp
商品名〈エピルーズ Exα〉 型名〈PD233〉






⚠ 危険 使用上の注意事項


下記のような医用電子機器との併用は、機器に誤作動をまねく恐れがありますので、使用しないでください。

| | |
|---|-----------------------|
|  禁止 | ●ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器 |
| | ●人工心臓等の生命維持用医用電子機器 |
| | ●心電計等の装着型医用電子機器 |
| | ●その他、体内に装着している医用電子機器 |

⚠ 警告 使用上の注意事項

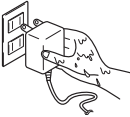

電源の取り扱いには、次の事項を必ず守ってください。
誤った取り扱いにより、感電・ショート・発火することがありますので、大変危険です。



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|------|----|-------------|--|-------|--|-------|
|  | <p>電源は、正しく配線された交流AC100V・50/60Hzのコンセントを必ずご使用ください。 火災や感電・けがの恐れがあります。</p> |  | | | | | | | | |
|  | <p>本製品にセットされた指定のACアダプターを必ずご使用ください。 発火・破裂・火災の恐れがあります。</p> | <table border="1"> <tr> <td>入力</td> <td>100V</td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>50/60Hz 8VA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DC20V</td> </tr> <tr> <td></td> <td>200mA</td> </tr> </table> | 入力 | 100V | 出力 | 50/60Hz 8VA | | DC20V | | 200mA |
| 入力 | 100V | | | | | | | | | |
| 出力 | 50/60Hz 8VA | | | | | | | | | |
| | DC20V | | | | | | | | | |
| | 200mA | | | | | | | | | |
|  | <p>濡れた手で電源プラグ、ACアダプター、本製品に触れないでください。 感電・ショート・発火の恐れがあり、大変危険です。</p> |  | | | | | | | | |




| | | |
|---|---|--|
|  | <p>損傷・異常のある電源プラグ、コード、および本製品は使用しないでください。 感電・ショート・発火の恐れがあり、大変危険です。 ※万一、損傷・異常のあるときは、ご購入先や発売元にお申し出ください。</p> |  |
|  | <p>電源コードの上に重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねた状態で使用しないでください。 感電・ショート・発火の恐れがあり、大変危険です。</p> |  |
|  | <p>通電中はタオル・毛布等を本製品にかけないでください。感電・ショート・発火の恐れがあり、大変危険です。</p> |  |
|  | <p>ご使用後は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、電源を抜くときは、コードを持たず、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。感電の恐れがあり、大変危険です。</p> |  |

⚠ 警告 使用上の注意事項

次のような症状の方、箇所(部位)には使用しないでください。








| | | |
|---|--|--|
|  | <p>次の症状をお持ちの方は本製品を絶対使用しないでください。 ★静脈瘤のある方 ★38℃以上の有熱性疾患の方 ★血圧異常をお持ちの方 ★急性疾患、伝染病疾患、結核性疾患の症状をお持ちの方</p> |  |
|---|--|--|





| | |
|---|--|
|  | <p>★悪性腫瘍の症状をお持ちの方 ★妊娠中の方や出産直後の方 ★心臓に障害のある方 ★ケロイド体質や傷跡になりやすい方 ★その他身体に異常のある方 ※上記に挙げた疾病以外で現在療養中、治療中の方は医師と相談してください。</p> |
|  | <p>次の箇所及び毛には絶対使用しないでください。 ★海水浴などで肌を焼く前の一週間以内及び日焼け後の傷んだ肌 ★炎症、傷、やけど、ニキビ、湿疹等皮膚のトラブルのある箇所 ★ほくろ(緑や青がかかったもの)、あざや炎症等異常のある箇所 ★鼻毛、耳毛、まつげ及び目のまわり、性器周辺等敏感な箇所 ★整形及びイレイズミをした箇所 ★心臓及びその近く、頭部など</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>右記に該当する方は、必ず医師とご相談の上、ご使用ください。</p> <p>★絆創膏にかぶれやすい方、物理的刺激に弱い方 ★アレルギー体質の方 ★皮膚疾患のある方 ★アトピー性皮膚炎の方 ★循環機能、内臓機能の弱い方 ★ホルモン異常や病気による毛髪障害のある方 ★お子様(15歳以下の方) ★以前脱毛商品をお使いになり、5~6時間たっても肌が充血したままで赤みが消えなかった方 ★角質形成の早い方 ★上記に挙げた方以外で体質等に問題のある方</p> |  |
|  | <p>★肌が弱い方 お肌の弱い方は、目立たない部位で試した後、異常のないことを確認してご使用ください。 ※万一、お肌に異常があったときは、直ちに使用を中止してください。</p> | |

※生理中の方は身体に負担をかけたくないものです。
生理が終わってからご使用ください。
※飲酒や薬を服用中、疲労の激しいときには、使用しないでください。

⚠ 注意 使用上の注意事項

| | |
|---|---|
|  <p>禁止</p> | <p>本製品は高周波電波を使用しておりますので、ラジオやテレビに雑音が入ったり、電子機器や電機製品に影響を与えることがありますので、使用時間をずらしたり、別の部屋で使用してください。携帯電話やパソコンとの併用もおやめください。</p>  |
|  <p>禁止</p> | <p>本製品やACアダプターに水をかけたり、水に浸したりしないでください。また、お風呂やシャワー等の水のかかる場所での使用、保管はおやめください。万一、水や他の液体に濡れたときは、すぐプラグを抜いてください。</p> |
|  <p>禁止</p> | <p>1回1時間以上のご使用は、おやめください。また、使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。</p> |
|  <p>禁止</p> | <p>お子様の手の届くところに保管しないでください。また、おもちゃにもしないでください。事故やトラブルの原因となる恐れがあります。</p> |
|  <p>禁止</p> | <p>高音、多湿、振動のあるところ、直射日光のあたる場所での使用または放置をしないでください。</p>  |

| | |
|---|---|
|  <p>禁止</p> | <p>本製品は家庭用の脱毛器です。業務用や人体の脱毛以外の目的で使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。</p> |
|  <p>禁止</p> | <p>本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。故障のときは、ご購入先または当社まで連絡をください。発火・異常動作・事故・故障・けがの元になります。</p> |
|  <p>注意</p> | <p>高周波コード(ツイーザーコード及びパッドコード)は、高周波の漏れを防ぐ構造になっています。無理にねじったり、曲げたりするとヒビが入る恐れがありますので取り扱いに充分ご注意ください。(このコードのヒビの修理は、無料保証の対象にはなりません)</p> |
|  <p>禁止</p> | <p>エビパッドは絶対折り曲げず、また、粘着面はなるべく指で触らないようにしてください。</p> <p>エビパッド及びアフターシートを使用して、お肌に異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。</p> <p>エビパッド及びアフターシートを肌に貼り付けたまま放置しないでください。皮膚の炎症などをおこす恐れがあります。</p> <p>エビパッドで脱毛処理中、エビパッドにベルトやネックレスなどの金属が触れないようにしてください。</p> <p>エビパッドの脱毛処理は1ヶ所に6分以上使用しないでください。毛の深部に過度の炎症をおこす可能性があります。</p> |

仕様 / 別売品

本体

| 項目 | 内容 | 項目 | 内容 |
|--------|-------------------|------|---------------|
| 商品名称 | ブラソニエ エビルースExα | 型番 | PD233 |
| | | 定格時間 | 連続1時間 |
| 高周波周波数 | 27.120MHz | サイズ | 縦160mm×高さ32mm |
| 消費電力 | 4W | 重量 | 約260g |
| | | 原産国 | 中国 |

ACアダプター

| 項目 | 内容 |
|-----|--------------------|
| 入力 | AC100V 50/60Hz 8VA |
| 出力 | DC20V 200mA |
| 原産国 | 中国 |


別売品

| 別売品 | 型番 | 別売品 | 型番 |
|--------------------|----------|----------------|----------|
| エビパッド(L・M・S)各1枚セット | PD231-41 | ACアダプター | P211-50 |
| エビパッド(L)2枚セット | PD231-32 | アフターシート 40枚セット | PD232-05 |
| エビパッド(M)3枚セット | PD231-23 | | |
| エビパッド(S)6枚セット | PD231-16 | | |


※お求めは、本製品のご購入先か当社にお申し込みください。

セット内容・各部の名前 付属品をお確かめください。

万一、不足したものがありましたら、当社お客様相談室 (TEL 0120-373-426) までご連絡ください。
 その際は商品名くエピルーズ EXα 型名くPD233)をお申し付けください。

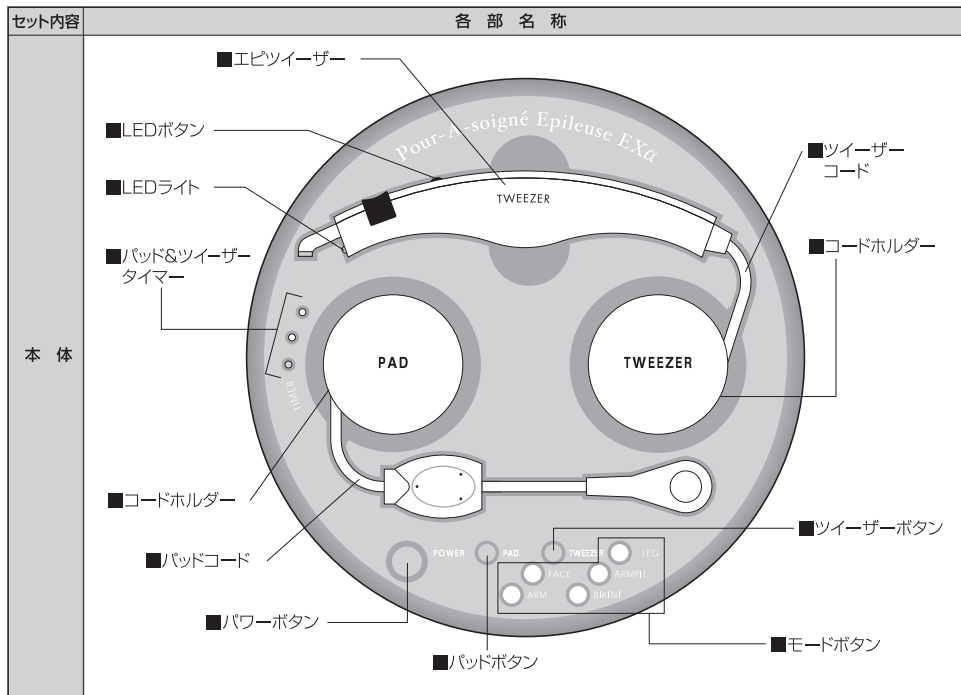


■本体裏面

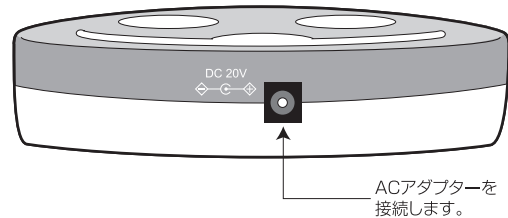


付 属 品

■ACアダプター

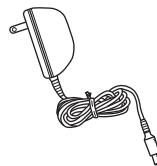

■エピパッド
3種 (L/M/S)

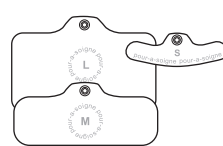

■取扱説明書



■アフターシート
10枚



■本体収納ポーチ




エピツイーザー脱毛 ムダ毛を抜く

準備はお済みですか？ それではまずエピツイーザーで毛を抜いてみましょう。

脱毛前の準備をしましょう

1 電源を入れる

ACアダプターを本体差込口とコンセントに接続する。

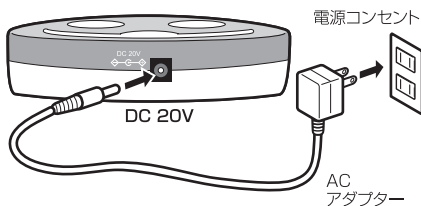


* 本製品にセットされた指定のACアダプターをご使用ください。

ランプ点灯

パワーボタンを押すとランプが点灯します。

* ご注意… パッドにてご使用の場合は、本体のパッドコードにL・M・S、いずれかのパッドをセットしてください。

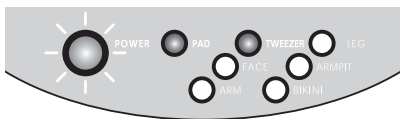

*この商品はパッド、ツイーザーの同時使用はできません。

2 お肌のお手入れ

脱毛する部位を清潔にして、よくお肌を乾かしてください。

- 脱毛及び前には必ずお肌を石けん等で洗い、化粧や汚れを取り、お肌を清潔にしてください。
- 入浴後、またはお肌が汗ばんでいるときは、肌のほてりがおさまるまで待つて脱毛を始めてください。
(お肌が濡れているときは、うまく脱毛できません)
- ムダ毛は3~5mm前後の長さが脱毛に適しています。
- 毛が長すぎる場合は、ハサミでカットしてください。



テスト脱毛

本格的な脱毛の前には必ず、目立たない部位でテストを行なってください。

* 実際にお使いになる手順と同様の手順で行なってください。


- 脱毛直後は、一時的に毛穴のまわりが赤くなるがありますが、これは自然な反応です。
- 毛穴のまわりの赤味が消えて、異常が見られないのを確認後、本格的な脱毛を始めてください。
- 異常が見られた場合は、本製品を使用しないでください。

POINT

脱毛しやすい部分で使い方に慣れましょう。


手始めはスネ、ふくらはぎ

● エピパッド/アフターシートの使用例

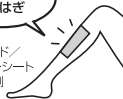

1 電源/ランプ/モードボタンの設定をする

- ① 電源を入れる。
- ② パワーボタンを押す(点灯)。
- ③ 「TWEEZER」ボタンを押してから脱毛する場所に応じてモードボタン(FACE・ARM・LEG・ARMPIT・BIKINI)の1つを選択します。
* モードボタンを押さないとツイーザーは機能しません。
- ④ 選択したモードボタンが点灯。

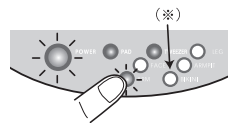


2 ムダ毛をカット

- ① 脱毛箇所の水分やメイク等を除去し、よく乾かし、お肌を清潔にする。
- ② 高周波エネルギーが毛の深部に集中するように、ムダ毛を3~5mmにカットする。




3 LEDライトを点灯させる

ツイーザー上部にあるLEDボタンを押すと、LEDライトが点灯します。スポットが当たって明るくなり、細かい毛をつかむ時など、とても便利です。薄暗い場所でも処理する時などは特に有効でしょう。
* ライトを点灯させなくても脱毛は出来ます。
* LEDライトはモード選択しないと点灯しません。

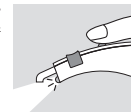

4 ムダ毛をはさむ

- ① 腕以外の処理をする時はあいている方の手で処理する毛が少し立つように皮膚を広げてください。
- ② LEDライトで狙いを定める。
- ③ ツイーザーを握り、ムダ毛をはさむ。
- ④ 作動ボタンを親指と人指し指ではさみ手前方向にスライドさせる。

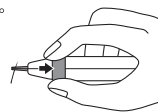

5 ムダ毛を抜く

- ① 約15~30秒後、毛の生えている方向に軽くムダ毛を引っ張ります。
- ② ツイーザーボタンが赤色になり、高周波が出力(処理開始)。
* 万一、ムダ毛がロックされなかった場合は、再度③~⑥を繰り返してください。



- ③ 約15~30秒後、毛の生えている方向に軽くムダ毛を引っ張ります。



ツイーザーをロックするとタイマーランプが3つ点灯し、約10秒に1個ずつ消灯していきます。ロック時間の目安にしてください。

- ④ 処理が完了するとムダ毛が引き抜かれます。
* 毛質等により脱毛時間に多少の差があります。
- ⑤ ムダ毛が処理されたら、作動ボタンを元の状態に戻す。
- ⑥ ロックが解除。ツイーザーランプが緑色に変わり、高周波の出力が止まります。



処理中はツイーザーの側面を皮膚の上に寝かせると楽です。



ムダ毛を抜くときは、手首を回して毛の伸びる方向に、優しく毛根から引き抜いてください。

エピツイーザー脱毛 各部位ムダ毛の処理のしかた

ポイント(部分)脱毛にはエピツイーザー、ワイド(広範囲)脱毛にはエピパッドが便利ですが、エピツイーザーでの全身脱毛もお試ください。適度の明るさと、顔の周辺の処理時には、拡大鏡がとて便利となります。毛の抜け方には個人差があります。高周波出力はFACE→ARM→LEG→ARMPIT→BIKINIの順で高くなっていきます。


| | |
|---|---|
| <p>口の周辺 モードボタン FACE を選択</p> <p>唇の上部端、アゴ、喉などは毛穴が深い場所です。蒸しタオル等をあて毛穴を広げるといいでしょう。太い毛の時は時間がかかる事もあります。出来るだけ端から始めて中央部に進めるようにしましょう。処理中に皮膚を突っ張らせておくとう�효です。毛の伸びる方向に引き抜いてください。</p>  | <p>ウデ モードボタン ARM を選択</p> <p>ウデの処理を行う時は、肌を突っ張らせながら引き抜く事が出来ないで、蒸しタオル等で事前に毛穴を広げ、抜けやすい状態を作ってください。</p>  |
| <p>マユ毛 モードボタン FACE を選択</p> <p>マユ毛の処理をする際には流行が変わる時があるので慎重に決めてください。左右ともに肩間から端に向かって処理してください。処理中は皮膚を突っ張らせ、マユ毛の伸びる方向に引き抜いてください。</p>  | <p>ビキニライン モードボタン BIKINI を選択</p> <p>ムダ毛の長さを3~5mmにします。毛穴が深く太いので、蒸しタオル等で毛穴を広げるといいでしょう。処理前に肌を乾かし、十分な時間をかけて毛の伸びる方向に引き抜いてください。</p>  |
| <p>わきの下 モードボタン ARMPIT を選択</p> <p>ムダ毛の長さを3~5mmにします。わきの下は毛の生え方が複雑なので、毛の伸びる方向を確かめて抜くようにしてください。ムダ毛が太い毛の場合は蒸しタオル等で毛穴を広げてください。</p>  | <p>アシ モードボタン LEG を選択</p> <p>ムダ毛の長さを3~5mmにしてください。アシは太い毛の多いところ。蒸しタオル等で毛穴を広げ、引き抜く時は肌を突っ張らせ、十分に時間をかけて処理してください。</p>  |

エピツイーザー脱毛 効果的なアドバイス

スルリと抜けなかったり、痛みがともなう場合、次のような原因が考えられます。


1 毛穴がしまっているとき

どうしても最初のうちは、慣れていないので緊張したり、力が入ったりします。そういう時は毛穴がしまってしまうので、毛根の処理はできていないのに、スルリとぬけずに、痛みがともなうことがあります。こういう時は、蒸しタオルを当てて毛穴を開くようにしてください。リラックスすることもうまく脱毛するコツといえます。

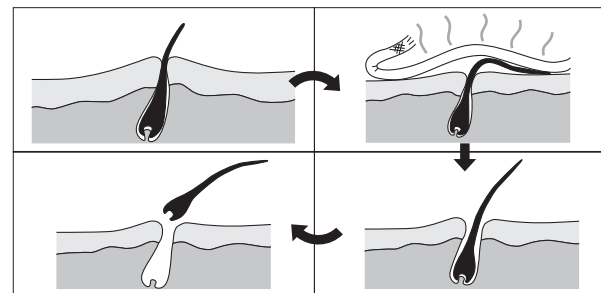

2 毛の深部が処理されていないとき

高周波脱毛器は、高周波エネルギーが毛幹を通して流れ、毛の深部に達します。ただし、毛によって高周波エネルギーが流れにくく、処理ができないこともあります。こういった時は、お肌から2~3mmの、これから伸びようとしている毛でお試ください。

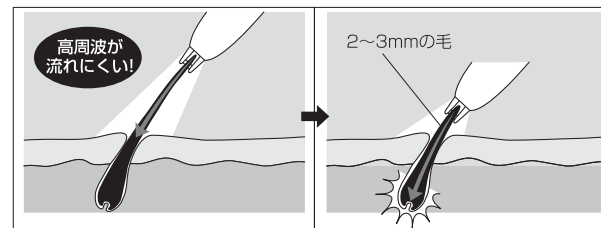

3 どうしてもムダ毛が抜けない

太い毛や毛根の深い毛は、処理に時間がかかることがあります。約30秒以上たっても抜けない場合は、少し刺激がありますが、ムダ毛を引き抜いてください。次に生えてくる毛(再生毛)でチャレンジしてみてください。

エピパッド脱毛 ムダ毛を抜く①

1 お肌を清潔にする

- ①脱毛部位の水分やメイク等を除去し、よく乾かし、お肌を清潔にする。
- ②高周波エネルギーが毛の深部に集中するようにムダ毛は3~5mmにカットする。





警告

すり傷、炎症を起こしている皮膚や日焼けをしている部位には使用しないでください。

2 電源/ランプ/パッドコードを接続する

- ①電源を入れる。
- ②パワーボタン/パワーランプ点灯。
※パッドボタンはタイマー機能を兼ねていますので、この段階では押さないで接続する。
- ③3種のエピパッド(L・M・S)から1つ選び、パッドコードをそのエピパッドのスナップ部に接続する。
※エピパッドを平らなところに置いて、パッドコードをエピパッドのスナップ部にしっかりと接続してください。

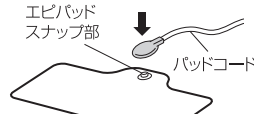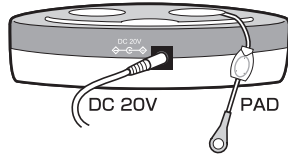

ご注意: エピパッドについている保護フィルムはまだはがさないでください。

3 パッドを貼る

- ①エピパッドの裏面の保護フィルムをはがす。
※はがした保護フィルムは、使用后粘着力を維持するために再度貼りますので、大切に保管してください。
- ②エピパッドを処理するムダ毛部分に貼る。

※下の表の使用部位を目安としてご自分に合った方法でご使用ください。

| エピパッド | 使用部位 |
|-------|-------------------------|
| L | 脚、ボディ等広範囲の部位処理に |
| M | 腕、わきの下やVゾーン、襟足等のラインの処理に |
| S | 上唇周辺部やその他細かい部位の処理に |

エピパッド脱毛 ムダ毛を抜く②



③ エピパッドを軽く手で押さえる

※エピパッドを皮膚に密着させると処理効果が高まるため、手で軽く押さえてください。



4 処理スタート

- ①PADボタンを押し、ランプを点灯させると、高周波エネルギーが毛の深部をトリートメントします。 ※処理中はゆっくりとくつろいでください。
- ②タイマーランプが3つ点灯し、2分毎に1個ずつ消えていきます。(トリートメントは6分間です。) 終了間隙になるとランプが点滅後、消灯し処理完了になります。
- ③エピパッドをはがす。 ※使い始めのエピパッドは粘着力が強いため、一気にはがすと皮膚を傷める可能性もありますので、隅の方から少しずつはがしてください。
- ④続けて他の部位を処理するときは、①~③を繰り返す。
- ⑤処理を終了するときは、はがしたエピパッドに保護フィルムを貼る。

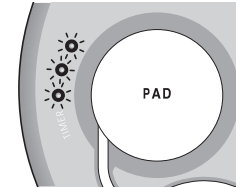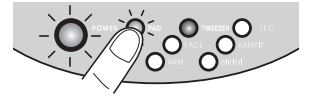

- ご注意
- ・脱毛処理後は同じ場所に6分以上使用しないでください。6分以上処理しますと毛の深部を過度に刺激し、炎症をおこす可能性があります。
 - ・エピパッド使用后、保護フィルムを貼らずにそのまま放置しますと粘着力がなくなり、再び使用できなくなりますのでご注意ください。
 - ・処理中にエピパッドをはがす場合は、電源を切ってから、エピパッドをはがしてください。
 - ・処理後はすぐエピパッドをはがしてください。(貼ったまま放置しておくとう皮膚炎等になる可能性があります)


※パッドの取り扱いについてのご留意

- 折り曲げないでください。
- 粘着面はなるべく指で触らないようにしてください。
- お風呂上がり、運動直後などは必ず汗等の水分を拭き取り、ご使用ください。
- 衣類などにエピパッドの粘着部が誤って貼りついた場合は、無理にはがさず、衣類の裏側からわずかな水で湿らせると、はがれやすくなります。
- 粘着力の落ちたエピパッドに関しては「エピパッドが貼りつきにくいとき」17ページをご覧ください。

エピパッド脱毛 アフターシートで脱毛①


エピパッド処理を終えた毛は、アフターシートで脱毛してください。

アフターシートはエピパッドで処理をした部位の広さに合わせて、ラインに沿ってハサミでカットしご使用ください。

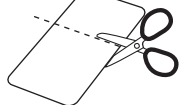

①脱毛する部分の毛の流れを十分に観察し、手の平で押さえるようにして流れを整える。

POINT 1

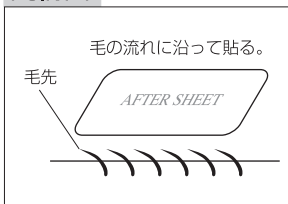

POINT 2



②アフターシートの裏紙をはがし、毛の流れにそって貼り、毛の根元までしっかりつくようによくならす。
(POINT 1 ~ 3)

POINT 3



③肌をピンと張る。
腕以外の部位で片手が空いている場合は、片方の手で肌がピンと張るように皮膚を伸ばしてください。
(POINT 4)

POINT 4



ご注意

- デリケートな部位(顔、Vライン等)、毛流の複雑な部位(ワキの下部)の脱毛処理は、エピパッドで高周波処理後、お手持ちのピンセットかエビツイザーで脱毛してください。
- エビツイザーをご使用の際は、本体の電源を切り、ご使用ください。
(一度高周波処理されたムダ毛を引き続き高周波処理すると、炎症を起こす可能性があります。)

エピパッド脱毛 アフターシートで脱毛②

- ④貼った後は、すぐに毛の流れと逆の方向に、肌こそって折り曲げるように勢いよく一気にパッと引きはがす。
- ・アフターシートは肌と平行になるようにはがしてください。
 - ・真上に引っ張ると肌に負担をかけ、うまく脱毛できません。
 - ・アフターシートを早いスピードでパッと引きはがすがコツです。ゆっくりはがすとムダ毛が抜けきれません。
 - ・はがした後は、肌をすぐに手の平で押さえると痛みが和らぎます。

- ⑤ムダ毛が抜けきれなかった時は、お手持ちのピンセットか電源を切ったエビツイザーで処理してください。


引き続き他の部位を脱毛する。

- ①～⑤の動作をくり返してください。
(本製品の連続使用は1時間を目安としてください)

正しいはがし方



失敗するはがし方

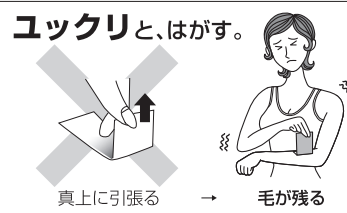

アフターケア (使用後のご注意)

- 脱毛後は、肌が一時的にうっすらと赤みをおび充血することがありますが、クリーム等何もつけずにそのまま清潔にしておいてください。通常は時間がたつと元に戻ります。
- 冷たいおしぼりをあてておくと、ほてりがおさまりやすくなります。
- 脱毛直後(5~6時間)の入浴はさけてください。

エピパッド 脱毛 各部位貼りつけ例〈毛流など〉

| | | |
|---|---|---|
| <p>わきの下</p> <p>処理中は、パッドが曲がらないように、処理する腕を上げてもう一方の手で軽くパッドを押さえてください。尚、わきの下は毛流が複雑ですので、アフターシートでは一気に抜き取れません。パッドで処理終了後、電源を切ったツイーザーかピンセット（毛抜き）で抜いてください。</p>  <p>〈毛流〉</p> | <p>Vライン</p> <p>Vラインの毛は長く生えていることが多いと思います。ムダ毛を3~5mmにカットし、高周波が毛の深部に流れやすくなるようにしてください。</p>  <p>〈毛流〉</p> | <p>腕/脚</p> <p>脱毛する範囲が広い部位です。毛の流れをよく観察し、パッドを貼ってください。軽くパッドを手で押さえ、パッドが皮膚に密着するようにしてください。</p>  <p>〈毛流〉 (腕表) (脚表) (脚裏)</p> |
| <p>背中(えり足)</p> <p>背中うらぶ毛等が生えている方が多いです。手の届く範囲はご自分でできますが、ご家族等の応援をお願いしてください。</p>  <p>〈毛流〉</p> | <p>上唇</p> <p>パッドを貼るときはパッドが唇に触れないように注意深く貼ってください。軽くパッドを手で押さえ、パッドが皮膚に密着するようにしてください。処理後は、お肌に負担をかけないために、ピンセット等で抜いてください。</p>  | |

収納する

ツイーザー使用后

- ①LEDボタンを押してライトを消し、パワーボタンで電源を切る。
- ②コンセントおよび本体からACアダプターを抜く。
※コードを引っ張らず、必ずACアダプターを持って抜いてください。アダプターのコードはきちんと束ねてください。
- ③ツイーザーコードを巻く。
ツイーザーコードはきちんとコードホルダーに巻き戻してください。
※コード類はゆとりをもたせて保管してください。
- ④エピツイーザーを本体収納部に入れる。

パッド使用后

- ①パワーボタンを押して電源を切る。
- ②コンセントおよび本体からACアダプターを抜く。
※コードを引っ張らず、必ずACアダプターを持って抜いてください。アダプターのコードはきちんと束ねてください。
- ③パッドコードからパッドを外す。
パッドコードをコードホルダーに巻き戻してください。
※パッドコードはゆとりをもたせて保管してください。
- ④エピパッドを保護。
保護フィルムを貼り、ビニール袋に入れ、きちんと保管してください。

※使用後のパッドなどは付属のポーチにしまってください。

エピパッドが 貼りつきにくい とき

エピパッドの粘着面が汚れて貼りつきにくくなったときは、軽く水で洗ってください。

(20ページ「エピパッドのお手入れ方法」参照)

- ・水洗いは、ご使用15回程度を1回の目安として、約3~4回できます。
 - ・エピパッドは消耗部品です。完全に粘着力がなくなったときは、別売品をお求めください。(5ページ)
- ※エピパッドは、水洗いの頻度や、お肌の状態、保管方法などで寿命が短くなることもあります。

Q & A

Q プラソニエ エピルーズExαはどのように作用するのですか？

A 高周波伝導エピツイーザーおよびエピパッドは、毛幹を通して高周波を毛の深部に伝え、効率良く脱毛をすることができます。

Q 副作用はありませんか？

A 高周波による脱毛方法は、お肌に影響が少ない脱毛ですが、毛を抜く行為自体は、お肌に負担がかかります。お肌の敏感な方は、脱毛箇所が赤くなることがあります。こういった場合でも1~2日で治りますが、万一お肌に異常があれば使用を止めてください。**皮膚の角質形成が早く、再生毛を閉じ込めてしまう体質の方がごまれにありますが、本品でも同様なことがあればご使用を中止してください。**

Q 生理中に使用できるのですか？

A 生理中は身体に負担をかけたくないものです。生理が終わってからご使用ください。

Q エピツイーザーで抜けない毛があるのですか？


A 11ページの「エピツイーザー脱毛 効果的なアドバイス」をご覧ください。それでもうまくいかないときは、当社お客様相談室へご相談ください。

Q エピツイーザーで毛を抜くと痛いのですか？

A 11ページの「エピツイーザー脱毛 効果的なアドバイス」をご覧ください。それでもうまくいかないときは、当社お客様相談室へご相談ください。
痛みの感覚は個人差があり、痛みを強く感じる方もありますが、きちんと脱毛処理が行なわれていれば、ピンセットで抜くよりも痛みは少ないと思います。

Q 体のどの部位でも使えますか？

A はい。顔ではアゴ、マユ毛、口のまわりなど、ボディでは腕、脚、ワキの下、ビキニラインなどに使用可能です。マユ毛は流行によって形が変わったりしますので、充分ご注意ください。
「安全上のご注意」に書かれている箇所(部位)の毛には絶対 사용하지しないでください。

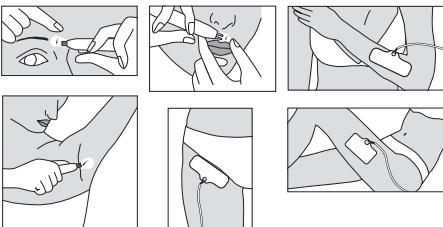

Q & A

Q 処理したあとすぐにメイクをしても大丈夫ですか？

A 脱毛処理後、5~6時間たってお肌に異常がないことを確認してから、メイクをしてください。

Q 男の人でも使えますか？

A もちろん大丈夫です。男性も女性と同じようにムダ毛の悩みがあります。脚、腕などは女性と同じようにできますが、ヒゲは毛質が太く、密集して生えているので、お肌に負担がかかりすぎお勧めはしません。

Q 肌が赤くなったのですが？(アフターシート使用時)

A 考えられることは…

- はがすときに肌をピンと張らなかった。
 - アフターシートを垂直に引っ張ってしまった。
- 等の場合に、脱毛後肌が一時的に赤くなります。もし赤みが気になるようでしたら、冷たいタオルで冷やすとよいでしょう。

Q うまく脱毛できない？(アフターシート使用時)

A 考えられる原因は…


- お肌に水分、脂分が残っている。
- ムダ毛が充分な長さ(3~5mm)ではなかった。
- はがすときに肌をピンと張らなかった。
- 毛の流れとは逆に引っ張らなかった。

●アフターシートを肌に平行にはがさず、垂直にはがした。

●ゆっくり引っ張った。
等が考えられます。
慣れてくればうまく脱毛できると思います。

Q パッドとツイーザーは同時に使用できますか？

A パッドとツイーザーは同時に使用できません。別々にご使用ください。

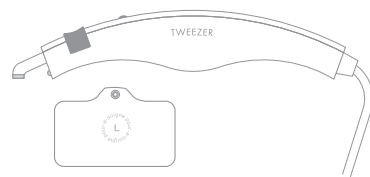

処理中はゆっくり
くつろいでください。

※気持ちをリラックスさせる
ことが大切です。



お手入れ方法

エビパッドのお手入れ方法

- ① パッドコードからエビパッドをはずす。
 - ② 少量の水を流しながらエビパッドの粘着面を指先で数秒洗う。
 - ③ 充分水を切って、粘着面を自然乾燥させる。
 - ④ 保護フィルムを貼る。
- ※エビパッドのスナップ部が水に濡れた場合は、乾いたタオル等でよく拭き取り、完全に乾燥させてください。

■エビパッドの取り扱いについてお願い

- ・お湯や洗剤、薬品(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。
- ・つまやブラシなどで粘着面を傷つけないでください。
- ・長時間、頻繁に水洗いしないでください。
- ・高温多湿、直射日光のあたる場所に置かないでください。



※本製品を廃棄される場合は、お住まいの各自治体の指示に従い廃棄処分をしてください。
地球環境のため、放置はしないでください。

本体のお手入れ方法

本体が汚れたときは、やわらかい布で軽くふき、汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布を浸してよく絞ってから、汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。

※**ご注意**：シンナー、ベンジン、研磨剤の入った洗剤、化学ぞうきんは使用しないでください。

エビツイーザーの先端部の接続チップには皮膚から分泌された脂分が付着しますので、ご使用後にはきれいな布でふき取ってください。汚れがひどいときは、市販の消毒用アルコールをお使いください。

- 保管場所は、高温多湿、振動、直射日光、お子様の手の届くところを避け、安全なところに保管してください。特に未使用のエビパッド、アフターシートは必ず外袋に入れて付属のケースにしまってください。

保証とアフターサービス

本製品には下記に記載しています「保証規定」に基づき、お買上げの日から1年間の品質保証が付いています。
保証書は必ず「お買上げ年月日」、「販売店」など、所定事項の記入及び記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
尚、故障ないし異常が発生したときは、使用せず、下記に記載しています
当社「お客様相談室」又はお買上げ先まで詳しい内容をお知らせください。

【保証規定】

1. 保証期間内に取扱説明書及び添付の注意書き等に従い正常な状態で使用して故障した場合には、本規定に基づき無料修理致します。但し、消耗品、付属品、メンテナンス費用等は除きます。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (1) 本保証書のご提示がないとき
 - (2) 本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、または、文字を書き換えられたもの
 - (3) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷のとき
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、公害、異常電圧、その他天変地異、戦争や紛争等による故障及び損傷のとき
 - (5) 使用上の誤り、事故、乱用、異常電圧及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (6) 注意事項を遵守しなかった原因による故障
 - (7) お客様の不注意による故障
3. 修理を依頼される場合はお買上げ販売店ないし当社へ本保証書を添えてご依頼ください。やむを得ず送付される場合は送料をご負担願います。
4. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本保証書は個人の使用についてのみ有効です。業務用に使用の場合は本保証書の対象外です。

本製品に対するご質問、
ご意見、ご相談は、当社お客様
相談室までご連絡ください。

※お問い合わせの際は下記商品名と型名を
お申し付けください。

☎0120-373-426

9:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日を除く)

http: www.better-life.co.jp
メール: info@better-life.co.jp
商品名(エビルーズ EXα)
型名(PD233)

修理や部品のご依頼は、
お買い求め先または、
当社お客様相談室まで
ご相談ください。

