

保証書

商品名	ピュアライトフラッシュ(LD280/LD280S)		
保証期間	本体：1年 付属消耗部品は適用外		
お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	TEL	-	-

■お買上げ店(販売店名・住所・TEL)

※包装・仕様等は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

愛情点検



●長年ご使用の電気器具の点検を！

- |                      |   |
|----------------------|---|
| ご使用の際、このようなことはありますか？ | <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れても、ときどき作動しないことがある。</li> <li>●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>●作動中に異常な音や、コゲくさいニオイがする。</li> <li>●プラグ、コード、本体、アダプターなどが異常に熱い。</li> </ul> |
|----------------------|---|

ご使用中


故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社に修理をご依頼ください。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または発売元にお問い合わせください。

— 発売元 —

ベターライフ株式会社

〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-11-23 Tel. 045-789-3761(代)

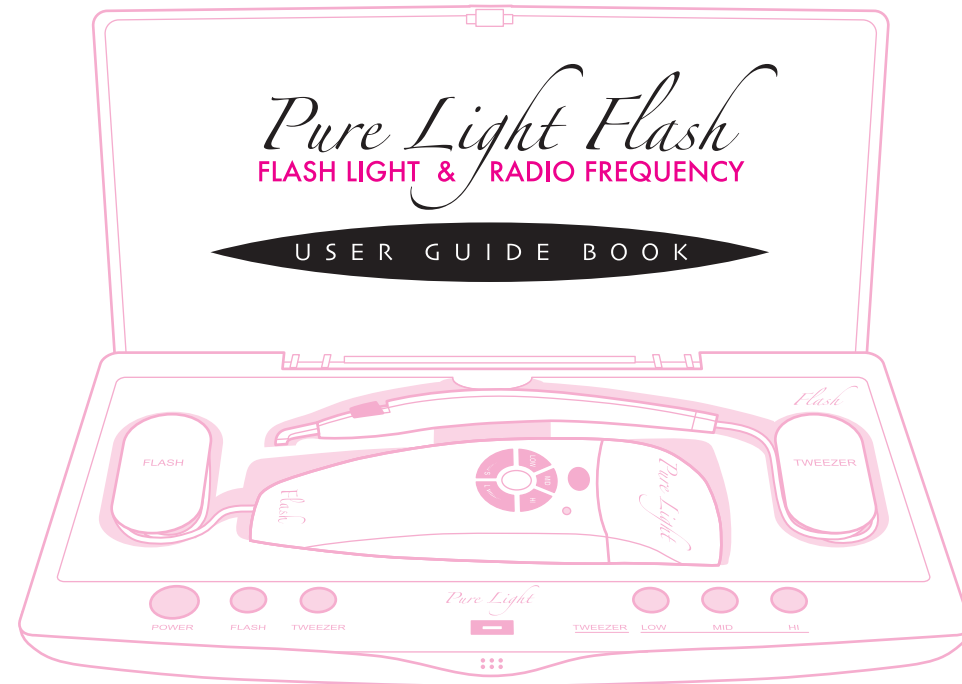

FOR YOUR BEAUTIFUL LIFE

Better Life Inc. www.better-life.co.jp

このたびは『ピュアライトフラッシュ』をお買上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を末永く正しく安全にご使用いただくために、

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになって正しくご使用ください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

## 目次

### ご使用前に

警告・注意事項など	2~6
保管・お手入れについて	7
セット内容・各部の名前	8~9
仕様／別売品	10

### ご使用方法

使用頻度・皮膚テストについて	11
出力レベルを設定する	12
フラッシュのご使用前に	13
フラッシュに関する警告	13
フラッシュ使用方法	14~17
トリートメントの記録を残しましょう(フラッシュ)	18~19
ツイーザー使用方法	20~21
高周波脱毛の効果的なアドバイス	22~23
Q&A フラッシュ	24
Q&A ツイーザー	24

### アフターサービス・保証書

保証とアフターサービス	25
保証書	裏面



## 特長

ピュアライトフラッシュは、フラッシュライト(以下フラッシュ)と高周波ツイーザー(以下ツイーザー)の二つの機能がセットされた美容器です。フラッシュは幅広い波長をもつブロードバンド波長、安全性を考慮したライト(軽い)な光線、肌色などを目安として出力を選択できるフラッシュモード機能などを特長としています。ツイーザーは眉毛やピキニラインなどのピンポイントのムダ毛処理に最適です。

## 取扱説明書



- 末永くお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みになってから正しくご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついております。いつでも見られるところに大切に保管してください。




## 安全上のご注意 ～正しく安全にお使いいただくために～

——ご使用前に、この「安全上のご注意」(1~7ページ)を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。——




ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなた自身や他の人々への危害や財産等への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。誤った取扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずお読みになって良く理解し、指示に従ってください。

※取扱説明書は本製品を正しく安全にお使いいただくために必要です。本製品を人に貸したり、差し上げるときには必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

●表示と意味については次のとおりです。

表示	意味
 <b>危険</b>	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。
 <b>警告</b>	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 * 物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。


●絵表示の例


 (表示例)	 は、「 <b>危険・警告・注意</b> 」を示します。 具体的な注意内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「 <b>感電注意</b> 」です。
 (表示例)	 は、「 <b>禁止行為</b> 」(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「 <b>分解禁止</b> 」です。
 (表示例)	 は、「 <b>行為の強制・指示</b> 」(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「 <b>プラグからコンセントを抜く</b> 」です。

本書に記載されている内容に関し、ご不明点、ご質問等は、お買上げ先または  
当社お客様相談室までご遠慮なくお問合せください。




当社お客様相談室 ☎0120-373-426 (9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)  
http://www.better-life.co.jp メール: info@better-life.co.jp  
商品名<ピュアライトフラッシュ> 型名<LD280/LD280S>

## ご使用前に

⚠ 危険	
 <b>禁止</b>	<p>●次のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器</li> <li>* 人工心肺等の生命維持用医療電子機器</li> <li>* 心電計等の装着型医療用電子機器</li> <li>* その他体内に装着している医療用電子機器</li> </ul> <p>※守らないと医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。</p>




⚠ 警告	
 <b>禁止</b>	<p>●次のような方は使用を避けてください。 ※事故や体調を悪化させるおそれがあります。</p> <p>* 心臓疾患の人 * 悪性腫瘍のある人及び過去に皮膚の悪性腫瘍を患った人 * 妊娠中や出産直後の人 * 生理中のとき * 血圧異常の人 * 急性(疼痛性)疾患の人 * 化学繊維などでかぶれた経験のある人 * 糖尿病の人 * てんかんの人 * アトピー性皮膚炎の人 * ヘルペス等感染症疾患の人 * アレルギー体質の人 * 有熱性疾患の人 * 結核性疾患の人 * 特に肌が敏感な人 * 顔面神経痛の人 * ケロイド体質の人 * 血友病疾患の人 * 狭心症のある人 * 多発性硬化症の人 * 精神機能、生理機能、内臓機能の弱い人 * 紫斑病など内出血しやすい人 * ステロイドなどの薬物で毛細血管拡張を起こしている人 * 交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある人 * 目の病気のある人(白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血など) * 成長過程の子供 * 自分の意志で動くことや意思表示のできない人 * 以前脱毛商品を使用後、5~6時間たっても肌が充血したままで赤みが消えなかった人 * 角質形成の早い人 * ポリフィリン症や日光及び光線などに過敏な人 * 過去6ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けた人 * 全身性疾患や代謝性疾患で皮膚の状態が正常でない人 * その他医師の治療を受けているときや療養中、身体に異常のある人は医師にご相談ください。</p> <p>●次の部位及びその周辺部には使用しないでください。</p> <p>* フラッシュは首から上(顔、頭)の部位には使用できません。 * 頭部、顔、目、まぶた、耳、鼻、口中、首、心臓、乳頭、乳輪、肛門、陰部、生殖器、粘膜部及びデリケートな部位及びその周辺の毛(まつ毛、鼻毛など) * 皮膚に傷、火傷、イボ、ニキビ、湿疹、吹出物やかゆみやほてりなど炎症や化膿等トラブルを起こしている部位 * 褐色から黒色、緑や青がかったホクロやアザなど</p> <p>* 色素沈着している部位(シミ、ソバカス、ホクロ、斑点など)やメラニンの濃い部位及び毛(ホクロ、乳輪の毛など)</p> <p>* 色素性病変の部位(アザなど) * 日焼けしている部位(特に2週間以内に強い日光や人工的に日焼けした部位)</p> <p>* 整形手術やイレズミした部位 * 体内に金属、プラスチック、シリコンを埋め込んでいる部位 * 感覚、知覚障害のある部位</p> <p>* 薬品を塗布している部位 * コラーゲンを注入している部位 * レーザー、各種のピーリングを行い回復期間が過ぎていない部位 * 皮膚の弱い部位や乾燥している部位 ※事故や身体・肌のトラブルのおそれがあります。</p>

## ご使用場所・電源等について

⚠ 警告	
 <b>禁止</b>	<p>●浴室内や湿気の多いところ、トイレ内等で水のかかりやすいところでの使用はしないでください。 ※事故や感電、故障のおそれがあります。</p> <p>●台所やストーブなど火気や熱気、湯気の近く、車の中、直射日光のあたるところでの使用はしないでください。 ※事故や感電、故障のおそれがあります。</p> <p>●ACアダプターのコードやプラグにホコリやゴミを付着させたまま使用しないでください。 ※火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。</p>
 <b>必ず守る</b>	<p>●必ず正しく配線された交流100V 50/60Hzの家庭用電源を使用してください。 ※守らないと火災や感電、やけどのおそれがあります。</p> <p>●必ず専用のACアダプターを使用してください。 ※守らないと事故やトラブルのおそれがあります。</p>
	<p>●使用中を中断するときや使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプター本体をもって引き抜いてください。 ※抜かないと火災や異常出力によりやけど、感電のおそれがあります。</p>


## 準備

### ⚠ 警告

 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●必ず本品の使用目的にしたがって使用してください。  <b>※守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●取扱説明書で定められた操作手順で操作してください。  <b>※守らないと事故や体調不良や故障をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示に従ってください。(11ページ参照)  <b>※守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のような体調のときは使用しないでください。            * 生理中るとき * 飲酒や薬の服用中るとき * 疲労が激しいとき            * 日焼け直後で肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき <b>※事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●他の機器との併用はしないでください。 <b>※事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
 <b>ぬれ手禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は家庭用機器ですので、業務用の目的では使用しないでください。  <b>※事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のようなときは使用しないでください。            * 本体、コード、ACアダプターが傷んでいたり、熱くなったりする。 * コンセントへの差込みがゆるい。  <b>※火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬれた手で使用しないでください。 <b>※感電やショート、事故のおそれがあります。</b></li> </ul>

## 準備

### ⚠ 注意

 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フラッシュの取扱いは次の事項を守ってください。            * 初めてご使用されるときは、腕の内側のような敏感で目立たない部位に照射(皮膚への照射テスト/以下皮膚テスト)し、2~3分後の皮膚に異常がないことを確認してください。(11ページ)            万一、異常が生じたときは、使用を中止し6ページ「ご使用中 必ず守る」の事項の指示に従ってください。            尚、一時的に多少の赤みが出る場合もあります。そのときは、その赤みが消え、異常がないことを確認してからご使用ください。            * ご使用前には必ず保護メガネを着用してください。この保護メガネは完全に遮光しているわけではありませんのでハンドピースから照射される光線を見ないでください。            * 専用ジェル(付属、別売)は、お肌がデリケートな人や敏感部を処理するときにご使用前に塗布してください。            * ハンドピースからフラッシュを照射するときは皮膚に完全に密着させてください。            (光線は自分や他人の目に向けて絶対照射しないでください。)            * 身につけている貴金属等は全てはずしてください。  <b>※上記必ずお守りください。事故や身体・肌のトラブルのおそれがあります。</b>  <b>※光の刺激によって増毛する場合もございます。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本商品は通電したままの放置はしないでください。 <b>※事故やトラブルの可能性がります。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用前にスイッチ等进行操作し、正常に作動するか確認してください。万一、損傷、異常等がある場合は、ご購入先か当社お客様相談室にご連絡ください。 <b>※守らないと、事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全てのコードは簡単に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。  <b>※守らないと、発火やショート、体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>



## ご使用中

### ⚠ 警告



必ず守る

●本製品を使用し、痛感や不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ、色素沈着、水ぶくれ、炎症等の皮膚症状があらわれたとき、その他に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、すぐに冷たいタオルなどで冷やし、当社お客様相談室にお問い合わせをいただくか、専門医にご相談ください。**※守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。**



禁止

●使用中に異臭や発熱したときは使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
**※事故や故障をおこすおそれがあります。**  
\* 点検のためお買上げ先、または当社までご相談ください。

## ご使用后

### ⚠ 注意



必ず守る

●本体、付属品などは、電源を切り、操作ボタン、コード類を元の位置に戻し、今後の使用に支障のないよう、整理し、保管してください。コード類は無理に曲げたり、丸めたりしないでください。  
**※守らないと接触不良や故障、火災をおこすおそれがあります。**

## 保管とお手入れ等

### ⚠ 警告



必ず守る

●お子様や自分で意思表示できない人の手の届かないところに保管してください。  
**※守らないと事故や体調不良、故障などをおこすおそれがあります。**

●お手入れは、電源を切り(パワーOFF)ACアダプターを本体から抜いて行ってください。  
**※守らないと感電などの事故をおこすおそれがあります。**



禁止

●本体や付属品を改造、分解、修理はしないでください。  
**※発火や異常動作によるけがのおそれがあります。 \* 修理はお買上げ先、または当社までご相談ください。**

### ⚠ 注意



必ず守る

●保管場所は、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)、高温多湿、振動、直射日光のあたるところを避け、安全なところに保管してください。**※守らないと事故や故障のおそれや劣化を早めたりします。**

●付属ジェルを塗布し、照射したときは、その都度乾いた柔らかい布でふき取ってください。  
**※守らないと故障のおそれや劣化を早めたりします。**



禁止

●本体や付属品の清浄は、シンナー、ベンジン、ガソリン等の揮発油や薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯を使用しないでください。汚れがひどいときは、水ですすめた中性洗剤に布を浸しよく絞ってから、汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。**※変色や傷がつくおそれがあります。**

●本体や付属品に水や他の液体をかけたり、浸したり、水中に入れないでください。  
**※火災や感電、ショート、やけど、故障のおそれがあります。**

●本体や付属品を熱器具に近づけたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。**※発熱、発火、故障等の原因になります。**

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、はさみこんだりしないでください。**※火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。**




●本体や付属品を高いところから落としたり、損傷したら使用をしないでください。**※ケガや故障のおそれがあります。**

●差込口に金属製の棒やピンなどを差し込まないでください。**※守らないと、発火、感電等の事故をおこすおそれがあります。**

**セット内容・各部の名前** 付属品をお確かめください。

万一、不足したものがありましたら、当社お客様相談室(TEL 0120-373-426)までご連絡ください。  
その際は商品名、型番をお申し付けください。

セット内容		
<p>■本体</p> 	<p>■ACアダプター</p> 	
<p>■スキン用ジェル</p>  <p>(お肌の弱い方や皮膚の敏感な箇所に。)</p>	<p>■取扱説明書(保証書)</p> 	<p>■保護メガネ</p>  <p>※本体及び付属品の形状は予告なしに変わる場合があります。</p>

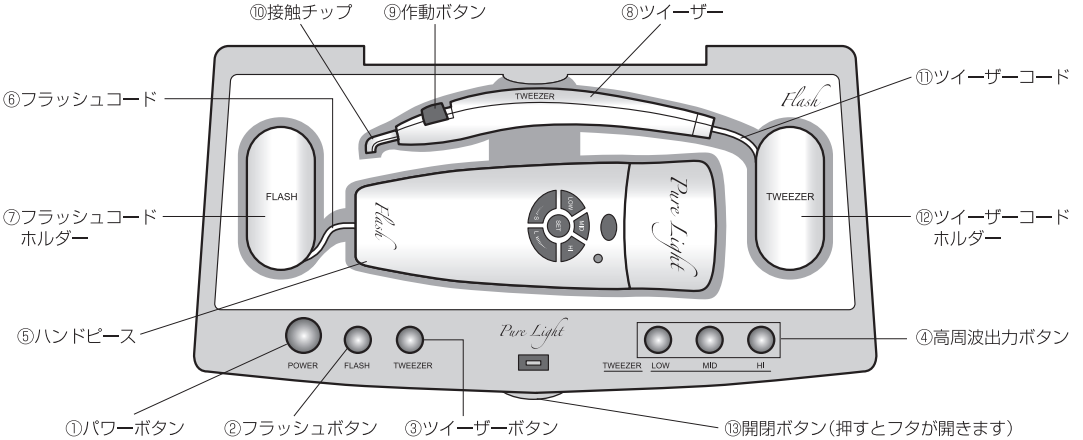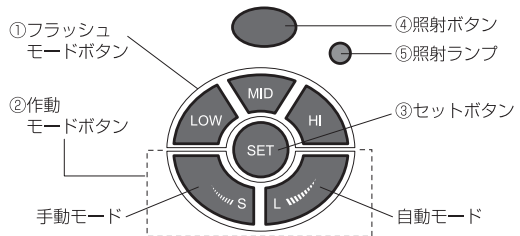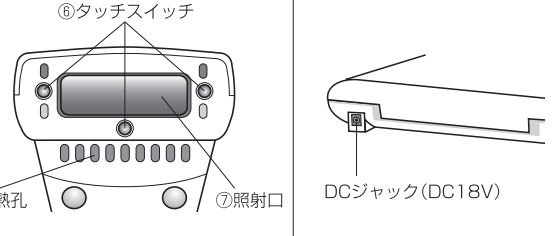各部の名前		
<p>本体</p> 		
<p>ハンドピース 操作部</p> 	<p>本体裏面</p> 	

## 仕様 / 別売品

### 本体

項目	内容	項目	内容
商品名称	ピュアライトフラッシュ	型番	LD280/LD280S
サイズ・重量	幅:約24.2 奥行:約12.8 高さ:約4.2cm 約460g(本体)	消費電力	18W
主材	ABS樹脂	定格時間	フラッシュ:連続20分 ツィーザー:連続60分
高周波周波数	27.120MHz	原産国	中国

### ACアダプター

項目	内容
入力	100V-240V 50/60Hz 35~49VA
出力	DC18V 1000mA
原産国	中国

### 別売品

別売品	型番	
ACアダプター	LD280-50	1ヶ
スキン用ジェル	PS701-20	1本

※ジェルは日本製

※お求めは、本製品のご購入先が当社にお申し込みください。

※本製品を廃棄される場合は、分別収集に従い廃棄処分をしてください。  
地球環境のため、放置はしないでください。

## 使用頻度

フラッシュの場合	ツィーザーの場合
<p>■1日30分程度。</p> <p>既に照射を行った箇所に使用する場合は、約1週間の間隔をあけて処理をしてください。</p> <p>※20分連続で使用した場合は30分以上機械を休ませてください。</p>	<p>■1日60分程度。</p> <p>ムダ毛が再生都度(約3~4週間)行ってください。</p>

※再生は個人差があります。

## ご使用前の皮膚テスト(パッチテスト)

初めてご使用される方は必ず行ってください。

- 皮膚が正常であることを確認します。
- フラッシュの場合、出力レベルは、フラッシュモードはHI、作動モードはSに設定して、腕の内側など目立たない箇所に照射し、火傷、水疱の反応があらわれたり、照射していない箇所にも反応したりする場合は、ご使用をおやめください。
- ツィーザーの場合、出力レベルはHIに設定して、腕や脚など目立たない箇所のムダ毛で行ってください。脱毛後に一時的に毛穴が赤くなることがあります。そのときはその赤みが消え、異常がないことを確認後、ご使用ください。万一、異常が見られた場合は、ご使用をおやめください。

## 出力レベルを設定する

### フラッシュ

#### ●フラッシュモードを設定する

下記の皮膚色タイプ分類にしたがってそれに適するモードを設定してください。

モード	皮膚色	肌状態	毛の太さ
HI		白黄色系 非常に明るい肌	細
MID		黄色系 明るい肌	中
LOW		黄色系に多少ブラウンがかった肌	太

**△警告** 日焼けした肌や黒い肌の方は使用できません。

※上記表示は分かりやすく快適に処理できるように目安として作成しています。  
皮膚色は別紙添付の色見本をご参照ください。

作動モード S	手動
作動モード L	自動

※初めてご使用の際は、「LOW」モードから始めお肌の様子をみて、上記を目安としてご自分に合ったモードでご使用ください。(尚、皮膚テストだけは「HI」で行ってください。)

※肌状態や脱毛部位と毛の太さが異なる場合は、ワンランク下げたモードでご使用ください。

※設定の仕方については14ページからの使用方法をご覧ください。

### ツイーザー

#### ●ツイーザーモードを設定する

モード	LOW	MID	HI
	低め	普通	高め
脱毛部位	顔周辺・敏感部の細い毛	腕周辺の普通(中)の毛	脚周辺の太い毛

## △フラッシュのご使用前に…

### ■必ずお読みいただき、製品をご理解の上でご使用ください。

トリートメントから2～3日…

- ①熱い湯につかるなど、体温が上がる行為は控えてください。  
※かゆみや赤みが出る可能性があります。
- ②トリートメントした箇所には刺激を与えないでください。
- ③トリートメントした箇所への日焼けは避けてください。
- ④清潔を保ってください。
- ⑤乾燥は避け、保湿を心がけてください。

### ■下記に該当する場合は使用を控えてください。

- ①前日に極度の飲酒をしたり、二日酔いの場合
- ②当日に飲酒した場合
- ③生理中の場合
- ④寝不足や疲労、体調不良の場合
- ⑤妊娠している場合、またはその可能性が考えられる場合
- ⑥肌に薬や日焼け止めなど落ちにくい成分の化粧品を塗っている場合
- ⑦予防注射の2週間前から接種後1カ月の間
- ⑧薬を服用している場合

## △フラッシュに関する警告

### ■2ページに記載の症状の方、箇所、及び次の事項に該当する症状の人はフラッシュを使用しないでください。

- ①褐色から黒色を呈する母斑、皮膚の一部に生じる色や形の異常、アザ、ホクロ
- ②日焼けをしている人  
(特に2週間以内に強い日光や人工日焼け装置で日焼けされた人)
- ③メラニンが濃い箇所(ホクロや乳輪)
- ④シミやホクロなどの色素沈着、アザなどの色素性病変の箇所
- ⑤薬品を使用している肌
- ⑥コラーゲンを注入している部分
- ⑦皮膚の弱い箇所や肌が乾燥している人
- ⑧ステロイドなどの薬物を持続的に使用して、皮膚が薄くなった場合
- ⑨各種ピーリングの使用(レーザー剥皮、海草剥皮など)を受けてから回復期間が過ぎていない場合
- ⑩光過敏反応関連疾患者(ポルフィリン症、多型日光疹、日光ジンマシン)
- ⑪3カ月以内に放射線治療及び化学療法を受けた経験のある人

### ■次のような部位には使用しないでください。

- ①目の周辺
  - ②まぶた
  - ③耳の周辺
  - ④口内
  - ⑤陰部
  - ⑥傷口
  - ⑦粘膜部
  - ⑧イボ
  - ⑨炎症部
  - ⑩化膿部
  - ⑪湿疹
  - ⑫刺青や色素沈着部
  - ⑬皮膚に異常がある部分
  - ⑭ニキビが化膿し炎症を起こしている部位
- ※通院中の方や医師から制限を受けている方は医師にご相談ください。

## 使用方法

### フラッシュを使う

(腕や脚など広範囲の箇所に)

#### 1週間に1回を目安にトリートメントしてください。

※初めてお使いになられる場合は使用前に11ページの皮膚テストを必ず行ってください。その後「LOW」モードから始め、様子をみながら他のモードに移行してください。

※冷蔵庫で冷やした清潔なぬれタオルをご用意ください。


### 1 剃毛する

#### ①処理する箇所をカミソリや電気シェーバーで剃る。

※毛抜きやワックス等でムダ毛を根元から抜かないでください。また、除毛クリームはお肌に負担を与えますので使用しないでください。

#### ②処理する箇所を清潔にする。

※脂分や汚れを石けんで洗い、きれいな水で洗い流し、素肌の状態にしてください。

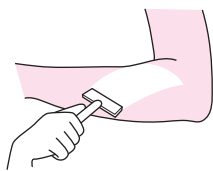

### お肌の弱めの方

お肌の弱めの方や皮膚の敏感な箇所は付属のスキン用ジェルを塗布してください。

※ジェルはうすくムラなく塗布してください。

※ジェルを塗布した場合は、使用都度、照射口及びその周辺についたジェルを乾いた柔らかい布でふき取ってください。(照射口を傷めないようにご注意ください。)





(うすくムラなく)

### 2 作動準備をする



#### ①電源を接続する。

- 1) ACアダプターを本体と電源コンセントに接続する。
- 2) 「POWER」ボタンを押す。点灯

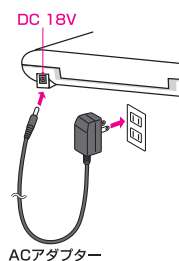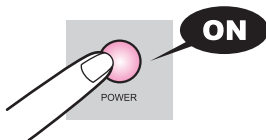

#### ②「FLASH」ボタンを押す。

⇒電子音とともに本体FLASHボタン外枠とハンドピースの「SET」ボタンが点灯します。

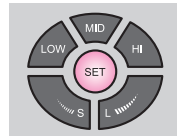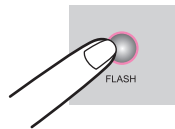


#### ③フラッシュコードをホルダーからはずす。

※無理にコードを引っ張らず、まっすぐに伸ばしてください。


#### ④「SET」ボタンを押す。

⇒フラッシュモード、作動モードボタンが点滅します。

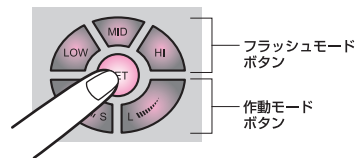

#### ⑤フラッシュ(肌色)モードを選ぶ。「LOW」「MID」「HI」のいずれかを押す。


⇒選択したボタンが点灯し他は消灯。作動モードボタンは点滅のままです。

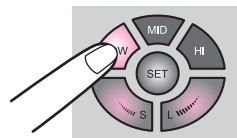

#### ⑥作動モードを選ぶ。「S」「L」のいずれかを押す。

⇒選択したボタンが点灯し他は消灯。

※⑤⑥は12ページ「出力レベルを設定する」参照

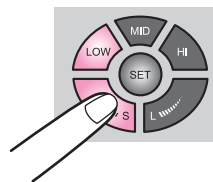

「S」は**手動モード**なので、照射ごとに照射ボタンを押してください。

「L」は**自動モード**です。照射ボタンを押し続けると約8秒ごと(Lowモードの場合)に自動照射します。ただし、タッチスイッチが肌にふれていないと照射されません。

※**注意** 照射後はすぐに照射対象部位を変え、同一箇所への連続照射は絶対に行わないようにしてください。特にLモードのときは照射ボタンを押し続けると自動照射しますので、充分ご注意ください。

#### ⑦「SET」ボタンを押す

⇒セットした内容を確認し完了。選択した各ボタンと照射ランプが点灯します。

照射ランプ	
赤色	準備中 ※準備時間は約8秒です。(LOWモードのとき)
緑色	照射可能

⇒20分タイマー作動

この段階でタイマーが作動します。約20分経過後、照射ランプ(赤)が点滅すると、セット内容が解除され、各モードボタンは消灯します。

⇒「power」ボタンを押してフラッシュを終了してください。

⇒30分以上の間隔をあげるとフラッシュは使用可能な状態に戻ります。尚、このタイマーとは関係なくツイーザーは使用できます。

#### ※保護装置

フラッシュを使用中に照射ランプが赤色(準備中)のままで、一定の時間が経過しても緑色(照射可能)に切り替わらない。という場合に保護装置が機能し自動停止していることが考えられます。この装置は、周囲の温度や連続照射などでハンドピース内の温度が上昇した時に機能します。このような状態になった時は、

⇒「power」ボタンを押してフラッシュを終了してください。

⇒30分以上の間隔をあげるとフラッシュは使用可能な状態に戻ります。尚、この装置とは関係なくツイーザーは使用できます。

※放熱孔に手を当てたり、ふさぐと加熱する原因になる場合もありますので充分ご注意ください。

### 3 保護メガネを着用する




※光線を見ないように充分ご注意ください。

### 4 照射する

①ハンドピースを照射部位にあてる。

⇒照射口にあるタッチスイッチを肌に軽く密着させてください。

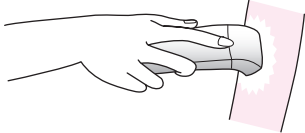


②照射ボタンを押す。⇒『ピー』という照射音とともに照射します。

⇒照射ランプが緑色になりましたら照射ボタンを押してください。  
⇒「L」を選択した場合は、照射ボタンを押し続けると約8秒ごと(Lowモードの場合)に自動照射します。(その際タッチスイッチは肌に密着させてください。)


※タッチスイッチが肌に密着していないときは、照射ボタンを押しても照射されませんので再度肌にタッチスイッチを密着しなおして照射してください。

※フラッシュの光線は見ないでください。

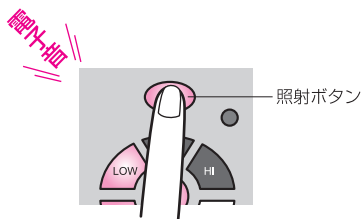

## ！ 注意 ！

照射後はすぐに照射対象部位を変え、同一箇所への連続照射は絶対に行わないようにしてください。特にLモードのときは照射ボタンを押し続けると自動照射しますので、充分ご注意ください。

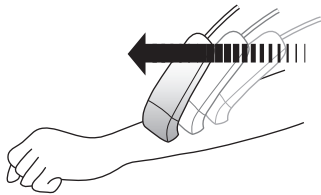

③反応をみる。

※肌に異常を感じたら冷やしたタオルでケアをお願いいたします。

※万一、火傷、水疱の反応があらわれたり、照射していない箇所にも反応があった場合は、ご使用をやめ、専門医か当社お客様相談室にご相談ください。

④続けて照射する場合。

※照射ランプが緑色になりましたら照射してください。

※ハンドピースを照射口の大きさ分を移動して照射してください。

※同一の箇所に照射しないでください。

### 5 終了する


①処理した箇所を記録しておく。

※次回の処理のために今回処理した箇所の記録を残してください。  
(18～19ページ「トリートメントの記録を残しましょう」参照)

②電源を切る。

- 1) [POWER] ボタンを押す。  
消灯
- 2) ACアダプターを本体と電源コンセントからはずす。

※コードは引っ張らずにきちんと束ねてください。

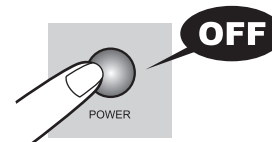

③フラッシュコードをホルダーに巻く。

※コードはゆとりを持たせて保管してください。

④ハンドピースを本体収納部に収める。

#### 使用中…

※ハンドピース先端部分はご使用により熱くなりますが異常ではありません。次のことをご守りください。

- ・約20分使用しましたら、タイマーが作動します。[POWER] ボタンを押してフラッシュを終了し、30分以上間隔を空けてから再度ご使用ください。
- ・また、ご使用中に異常を感じた場合は、当社お客様相談室にご相談ください。

#### 使用后…

一時的に多少の赤みが出る場合があります。そのときは赤みが消え、異常のないことを確認してからご使用ください。





## ツイーザーを使う (マユ毛などのピンポイントに)

※初めてお使いになれる場合は使用前に11ページの皮膚テストを必ず行ってください。

### 1 お肌のお手入れ


①脱毛する箇所を清潔にする。

※脂分や汚れを石けん等で洗い、きれいな水で洗い流し素肌の状態にしてください。

②お肌が汗ばんでいるときは、お肌のほてりがおさまるのを待つ。

※お肌がぬれているときは、脱毛できません。

③ムダ毛を2~5mm前後の長さにカットする。


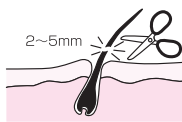


### 2 作動準備をする

①電源を接続する。



1) ACアダプターを本体と電源コンセントに接続する。

2) [POWER] ボタンを押す(ON)。点灯

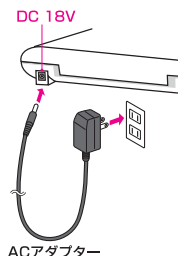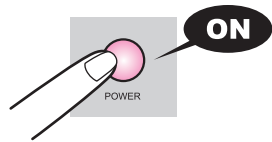


②[TWEEZER] ボタンを押す。

⇒TWEEZERボタンの外枠が点灯(緑色)し、同時に高周波出力ボタン(LOW・MID・HI)の外枠が点滅(赤色)します。

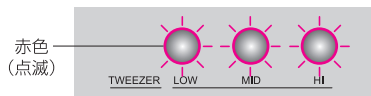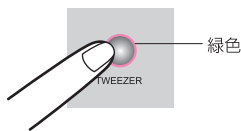

③出力レベルを選ぶ。『LOW』『MID』『HI』のいずれかのボタンを押す。

⇒選択したボタンは点灯し他は消灯します。  
(11ページ「出力レベルを設定する」参照)

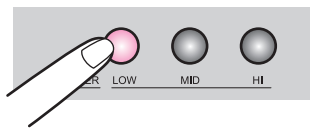

④ツイーザーコードをホルダーからはずす。

※無理にコードを引っ張らず、まっすぐに伸ばしてください。

### 3 脱毛する

①皮膚を伸ばす。

空いている手の親指と人差し指で、処理する毛が少し立つように皮膚をしっかりと広げる。

※間違っても皮膚をはさむのも防げます。




②ムダ毛をはさむ。

1) ツイーザーを握り、ムダ毛をはさむ。

2) 作動ボタンを親指および人差し指で矢印の方向にスライドさせる。

3) ムダ毛がロックされたら、作動ボタンから指をはなす。

4) ツイーザーボタンが赤色になり、高周波出力(処理開始)。

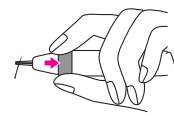

※万一、ムダ毛がロックされなかった場合は、再度3)~4)を繰り返してください。

※ロック後、5分経過すると、ツイーザーボタンが点滅しますので、そのような場合は一度ロックを解除し、むだ毛をロックし直してください。(ロックして5分以上経過すると高周波の出力が止まります。)ロックを解除しないとPOWERボタンとFLASHボタン以外無効となります。

③ムダ毛を抜く。

1) 約15~30秒後、毛の生えている方向に軽くムダ毛を引っ張ります。

2) 処理が完了するとムダ毛が引き抜かれます。

※毛質等により脱毛時間に多少の差があります。

3) ムダ毛が処理されたら、作動ボタンを元の状態に戻す。

4) ロックが解除。ツイーザーランプが緑色に変わり、高周波の出力が止まります。



処理中はツイーザーの側面を皮膚の上に寝かせると楽です。

ムダ毛を抜くときは、手首を回して毛の伸びる方向に、優しく毛根から引き抜いてください。

④どうしてもムダ毛が抜けない。

太い毛や毛根の深い毛は、処理に時間がかかることがあります。約30秒以上たっても抜けられない場合は、次に生えてくる毛(再生毛)でチャレンジしてみてください。

※抜けにくい、痛みを感じる時は23ページ「ツイーザー脱毛・効果的なアドバイス」をご覧ください。

### 4 終了する

①電源を切る

1) [POWER] ボタンを押す(OFF)。消灯


2) ACアダプターを本体と電源コンセントからはずす。

※コードは引っ張らずにきちんと束ねてください。

②ツイーザーコードをホルダーに巻く

※コードはゆとりを持たせて保管してください。

③ツイーザーを本体収納部に収める。

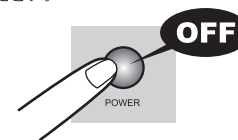

## 高周波脱毛の効果的なアドバイス


### ツイーザー脱毛 各部位ムダ毛の処理のしかた

ピンポイントの脱毛にはツイーザー脱毛を使いましょう。

#### 口の周辺

LOW を選択

唇の上部端、アゴ、喉などは毛穴が深い場所です。蒸しタオル等をあて毛穴を広げるといいでしょう。太い毛のときは時間がかかる事もあります。出来るだけ端から始めて中央部に進めるようにしましょう。処理中に皮膚を突っ張らせておくとう�효です。毛の伸びる方向に引き抜いてください。

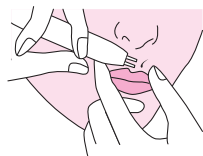

#### わきの下

MID を選択


ムダ毛の長さを2~5mmにします。わきの下は毛の生え方が複雑なので、毛の伸びる方向を確かめて抜くようにしてください。ムダ毛が太い毛の場合は蒸しタオル等で毛穴を広げてください。



#### マユ毛

LOW を選択


マユ毛の処理をする際には流行が変わるときがあるので慎重に決めてください。左右ともに眉間から端に向かって処理してください。処理中は皮膚を突っ張らせ、マユ毛の伸びる方向に引き抜いてください。

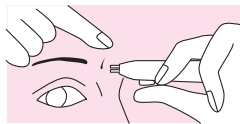

#### ビキニライン

HI を選択

ムダ毛の長さを2~5mmにします。毛穴が深く太いので、蒸しタオル等で毛穴を広げるといいでしょう。処理前に肌を乾かし、十分な時間をかけて毛の伸びる方向に引き抜いてください。

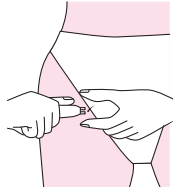


### ツイーザー脱毛 効果的なアドバイス

スルリと抜けなかったり、痛みがともなう場合、次のような原因が考えられます。


#### 1 毛穴がしまっているとき

どうしても最初のうちは、慣れていないので緊張したり、力が入ったりします。そういうときは毛穴がしまってしまうので、毛根の処理はできているのに、スルリと抜けずに、痛みがともなうことがあります。こういうときは、蒸しタオルをあてて毛穴を開くようにしてください。リラックスすることもうまく脱毛をするコツといえます。

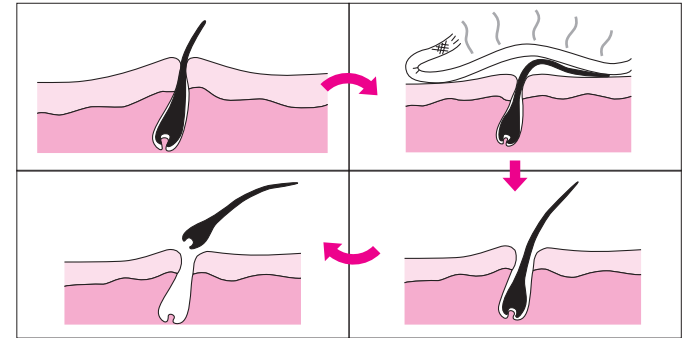

#### 2 毛の深部が処理されていないとき

毛によって高周波エネルギーが流れにくく、処理ができないこともあります。こういったときは、お肌から2~3mmのこれから伸びようとしている毛でお試してください。

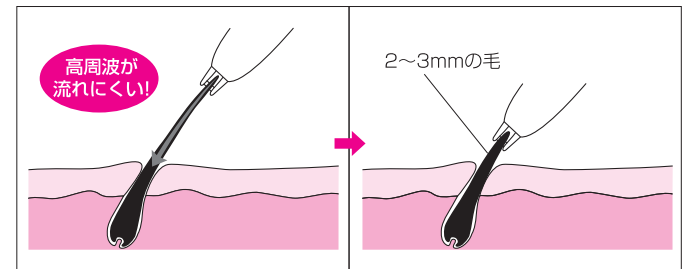

## Q & A

### フラッシュライト(光)とは何ですか？

光をパルス化して発生させる人工的な光です。その光を集中させて一気に照射します。

### 毎日使用しても大丈夫ですか？

処理した同一部位以外でしたら毎日使用されても問題はありません。既に処理をされた箇所は1週間の間隔をあけてトリートメントしてください。

### してはいけないことはありますか？

1回の処理で同じ箇所に繰り返し照射はしないでください