

pour-A-soigné
Style Epi 100
sa ku ra

保 証 書

商 品 名	プラソニエ スタイルエピ 100 sakura (PD221)
保 証 期 間	本体：1年 付属消耗部品は適用外
お 買 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	お名前
	ご住所 〒
	TEL - -

本書は本書の「保証規定」に基づき、修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、当社に修理を依頼してください。尚、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問合せください。

■お買上げ店（販売店名・住所・TEL）

※包装・仕様等は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

— 発売元 —

 ベターライフ株式会社

〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-11-23 Tel.045-789-3761(代)

高周波脱毛器
スタイルエピ100さくら



家庭用
保証書1年間付

ご使用前に

安全上のご注意 1
使用上の注意事項 1~5
セット内容・各部のなまえ・仕様 6

使い方

脱毛スタート 7~8
各部ムダ毛処理のしかた 9
脱毛の効果的アドバイス 10
Q & A 11

お手入れ保管・保証など

お手入れ方法について 12
保証について 13~14
保証書 15

取扱説明書



- 末永くお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みになってから正しくご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついております。いつでも見ることがができる場所に大切に保管してください。



 Better Life Inc.

安全上のご注意 必ずお読みください。

このたびは『ブラソニエ スタイルエピ 100 sakura』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を末永く正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになって良く理解し、指示に従ってください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

■本取扱説明書に示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、ご使用者自身や他の人々への危害や財産等への損害を未然に防止するためのものです。内容により「警告」「注意」に区分しています。

●区分の意味は次のとおりです。

 警告	人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

*物的損害とは、家屋、家財、および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●表示記号の意味は次のとおりです。


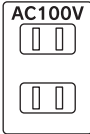
		
「警告」や「注意」を促す事項を表します。	禁止を表します。	「必ず行う事」を表します。

■本取扱説明書に記載されている内容および本製品に関してのご不明点、ご質問等は、ご購入先または当社お客様相談室までご遠慮なくお問合せください。




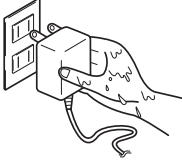

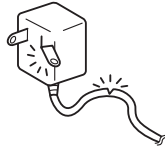




当社お客様相談室 ☎0120-373-426
(9:00～17:00 土・日・祝祭日を除く)

⚠ 警告 (使用上の注意事項)

電源の取り扱いは、次の事項を必ず守ってください。誤った取り扱いにより、感電・ショート・発火することがありますので大変危険です。





	電源は、正しく配線された交流AC100V・50/60Hzのコンセントを必ずご使用ください。 火災や感電・けがの恐れがあります。	
--	--	---

⚠ 警告 (使用上の注意事項)



	本製品にセットされた指定のACアダプターを必ずご使用ください。 発火、破裂、火災の原因となります。	 <p>入力 100V 50/60Hz 出力 DC20V 200mA</p>
	濡れた手で電源プラグ、ACアダプター、本製品に触れないでください。 感電・ショートの恐れがあり、大変危険です。	
	損傷・異常のある電源プラグ、コード、及び本製品は使用しないでください。 感電・ショート・発火の恐れがあり、大変危険です。 ※万一、損傷・異常のあるときは、ご購入先や発売元にお申し出ください。	
	電源コードの上に重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねた状態で使用しないでください。 感電・ショート・発火の恐れがあり、大変危険です。	
	通電中はタオル・毛布等を本製品にかけないでください。 発火及び火災の恐れがあり、大変危険です。	
	ご使用後は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、電源を抜くときは、コードを持たず、必ずACアダプター本体をもって引き抜いてください。 感電の恐れがあり、大変危険です。	

⚠ 警告 (使用上の注意事項)

ご使用になる前に目立たない箇所を試した後、お肌に異常がないことを確認してご使用ください。


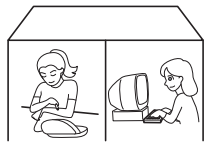


<p> 禁止</p> <p>右記に該当する方、及び箇所、毛には本製品を使用しないでください。</p>	<p>次の症状をお持ちの方は本製品を絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ 静脈瘤のある方 ★ 38℃以上の有熱性疾患の方 ★ 血圧異常をお持ちの方 ★ 急性疾患、伝染病疾患、結核性疾患等の症状をお持ちの方 ★ 悪性腫瘍の症状をお持ちの方 ★ 妊娠中の方 (出産直後も使用しないでください。) ★ 心臓に障害のある方 (特にペースメーカーを使用している方) ★ 体内機器を装着している方 ★ ケロイド体質や傷跡になりやすい方 ★ その他身体に異常のある方 ★ 上記に挙げた疾病以外で現在療養中、治療中の方は医師と相談してください。 
<p></p>	<p>次の箇所及び毛には絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ 炎症、傷、やけど、ニキビ、湿疹等皮膚のトラブルのある箇所 ★ ほくろ (緑や青がかかったもの)、あざや炎症等異常のある箇所 ★ 鼻毛、耳毛、まつげ及び目のまわり、性器周辺等敏感な箇所 ★ 整形手術した箇所 ★ 心臓及びその近く、頭部
<p></p> <p>右記に該当する方は、必ず医師とご相談の上ご使用ください。</p>	<p>次の症状をお持ちの方は必ず医師にご相談の上、ご使用ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ アレルギー体質の方 ★ 皮膚疾患等のある方 ★ アトピー性皮膚炎の方 ★ 循環機能、内臓機能の弱い方 ★ ホルモン異常や病気による毛髪傷害のある方 ★ お子様 (15歳以下の方) ★ 以前脱毛商品をお使いになり、5～6時間たっても毛穴周辺が充血したまま赤みが消えなかった方。 ★ 上記に挙げた疾病以外で現在療養中、治療中の方は医師と相談してください。 

⚠ 警告 (使用上の注意事項)









<p></p>	<p>肌の弱い方 お肌の弱い方は、敏感な部分でのご使用に際して、目立たない箇所を試した後、異常のないことを確認してご使用ください。</p>
<p> 禁止</p> <p>右記に該当する方は、必ず医師とご相談の上ご使用ください。</p>	<p>万一、お肌に異常があったときは、直ちに使用を中止してください。</p> <p>角質形成の早い方 角質形成が早く毛穴がふさがる等脱毛に適合しない体質の方のご使用はおやめください。</p>

(生理中の方は身体に負担をかけたくないものです。生理が終わってからご使用ください。)
(飲酒や薬を服用中、疲労の激しいときは、使用しないでください。)




⚠ 注意 (使用上の注意事項)

<p> 禁止</p>	<p>本製品は高周波電波を使用しておりますので、ラジオやテレビに雑音が入ったり、電子機器や電気製品に影響を与えることがありますので、使用時間をずらしたり、別の部屋で使用してください。</p> <p>携帯電話やパソコンとの併用もお止めください。</p> 
<p> 禁止</p>	<p>本製品やACアダプターに水をかけたり、水に浸したりしないでください。また、お風呂やシャワー等の水のかかる場所での使用、保管はおやめください。</p> <p>万一、水や他の液体に濡れたときは、直ぐプラグを抜いてください。</p> <p>事故やトラブル、故障の原因となります。</p>
<p> 禁止</p>	<p>1回1時間以上のご使用は、おやめください。また、使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。</p>

警告 (使用上の注意事項)

 禁止	お子様手の届くところに保管しないでください。また、おもちやにもしないでください。 事故やトラブルの原因となる恐れがあります。	
 禁止	高温、多湿、振動のあるところ、直射日光のあたる場所での使用または放置をしないでください。	
 禁止	本製品は家庭用の脱毛器です。業務用や脱毛以外の目的で使用しないでください。 事故やトラブルの原因となります。	
 禁止	本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。故障の時は、ご購入先または当社までご連絡ください。 発火・異常動作・事故・故障・けがの元になります。	
 注意	高周波コードは、高周波の漏れを防ぐ構造になっています。無理にねじったり、曲げたりしますとヒビが入る恐れがありますので取扱いに充分ご注意ください。 (このコードのヒビの修理は、無料保証の対象になりません。)	
 禁止	ご使用前に、ベルト、ネックレス、指輪などの金属類は身体から外してください。	

万一、不足のものがありましたら、ベターライフお客様相談室 (☎ 0120-373-426) までご連絡ください。

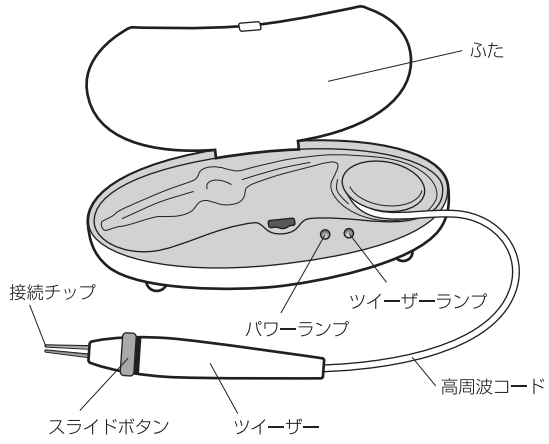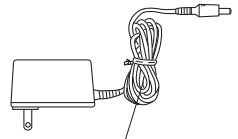セット内容	各部のなまえ
本体脱毛器	
付属品	ACアダプター  アダプターコード 取扱説明書 (保証書付) 

【仕様】

定格電圧	定格周波数	定格時間	消費電力	高周波周波数	サイズ
AC100V	50/60Hz	連続1時間	8W	27,120MHz	20,3×10,7×3,4cm

アダプターコード長さ：約180cm 原産国：中国 (Planned by Better Life Inc.)
 型名：PD221

※**ご注意** 1時間以上使用するとき、一旦ACアダプターをコンセントから抜いて1時間以上休ませてから使用して下さい。

脱毛スタート

脱毛する箇所を清潔にして、よく乾かしてください。

脱毛処理する箇所のお肌の汚れ、メイク等の脂分を石けん、クレンジングローション等で除去し、完全に乾かしてください。また、高周波エネルギーが深部に集中するように毛の長さを3～5mmぐらいにします。毛が長すぎたら切っておきましょう。


テスト脱毛

本格的な脱毛の前に必ず、目立たない箇所でもテスト脱毛を行ってください。

脱毛直後に一時的に毛穴が赤くなることがあります。その時は、その赤みが消え、異常がないことを確認後、本格的な脱毛をはじめてください。万一、異常が見られた場合は、本品を使用しないでください。


Step1 電源を入れる

ACアダプターを本体と電源コンセントに接続する。

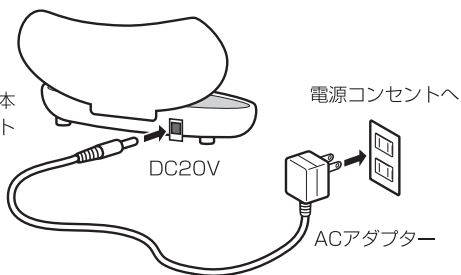


Step2 ランプ確認

①電源を入れるとパワーランプ点灯

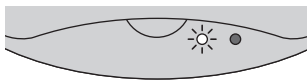

②ツイーザーのライドボタンを手前に引くと接続チップがロックされツイーザーランプ点灯 (高周波エネルギー出力)

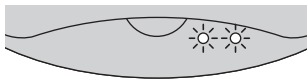

③ライドボタンを元の状態に戻すとツイーザーランプが消える (高周波エネルギーの出力が止まる)

注意：スライドボタンをロックした状態 (ツイーザーランプが点灯) で放置すると高周波エネルギーが出力し続け、本器内部に熱がこもり、故障及び火災等の原因になります。必ず、ご使用ごとにスライドボタンを元の位置に戻し、ロックを解除 (ツイーザーランプの点灯が消える) してください。又、ご使用後は、必ず、電源からアダプターを抜いてください。



Step3 皮膚を伸ばす

空いている手の親指と人差し指で、処理する毛が少し立つように皮膚をしっかりと広げる。間違えて皮膚をはさむのも防げます。



Step4 ムダ毛をはさむ


- ①ツイーザーを握り、ムダ毛をはさむ
- ②スライドボタンを人差し指と親指で手前方向に引きます。
- ③ムダ毛がきちんとはさめたら、スライドボタンから指をはなす。

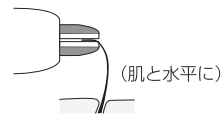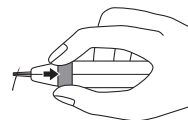

(万一、ムダ毛がロックされなかった場合は、再度同じことを繰り返してください。)

Step5 ムダ毛をぬく

- ①約15～30秒間、毛のはえている方向に軽くムダ毛を引っ張ります。
 - ②処理が完了するとムダ毛が引き抜かれます。
- ※毛質等により脱毛処理時間に多少の差異があります。

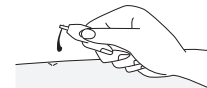

処理中はツイーザーの側面を皮膚の上に寝かせるのと楽です。

手首を回して毛の伸びる方向に、優しく毛根から引き抜いてください。

Step6 処理終了 ～ 収納する

- ①ACアダプターを電源コンセント及び本体から抜く
※電源を抜くときは、コードを引っ張らず、必ずACアダプターを持って抜いてください。また、アダプターコードはきちんと束ねてください。
- ②高周波コードを巻く
元の位置にきちんと戻してください。
※高周波コードを無理に引っ張ったり、ねじったり、曲げたり、乱雑に扱わないでください。
- ③保管場所は、高温多湿、振動、直射日光、お子様の手の届くところを避け、安全なところに保管してください。

どうしても抜けない

太い毛や毛根の深い毛等、毛質により処理に時間がかかることがあります。約30秒以上たっても抜けない場合は、少し刺激がありますが、ムダ毛を引き抜いてください。次に生えてくる毛 (再生毛) でチャレンジしてみてください。

※抜けにくい、痛みを感じるときは、「脱毛の効果的なアドバイス」をご覧ください。

各部ムダ毛の処理のしかた

脱毛には適度の明るさと、顔の周辺の処理時には拡大鏡がとて便利となります。


<p>唇の上部</p> <p>一方の端から始めて段々中央部へと進んでいきます。中央部に比べて、端の毛穴は深いので、処理に時間がかかります。処理中には皮膚を引張っておきます。毛を抜くときは毛の伸びる方向に軽く引きます。</p> 	<p>アゴとノド</p> <p>アゴとノドも毛穴が深い場所です。蒸しタオル等をあて毛穴を広げるといいでしょう。太い毛のときは時間がかかることもあります。ばらばらに処理せずできるだけ端から始めて中央部に進めるようにしましょう。毛を抜く向きは毛の伸びる方向です。</p> 
<p>マユ毛</p> <p>マユ毛の処理には注意が必要です。流行が変わるのでマユ毛の形を慎重に決めなければなりません。マユ毛の処理は、中央部（目と目の間）から端にむかって行い、片方が終わったら、また中央から始めます。処理中は、皮膚を張りマユ毛の伸びる方向に引いて抜くようにしてください。</p> 	<p>胸の周辺部</p> <p>胸の周辺部の毛は珍しくありません。処理の仕方は、他の場所と全く変わりません。ムダ毛は適度な長さ（3～5mm）にして、充分な処理時間で行います。毛の伸びる方向に引き抜いて脱毛します。</p> 
<p>ビキニライン</p> <p>ムダ毛の長さを3～5mmにします。通常毛穴が深く太いので、蒸しタオルで毛穴を開く必要があるかもしれません。処理の前には肌を乾かしてください。最初は外側から次第に中へと進めます。毛を抜く方向は、毛の伸びる方向です。処理には充分時間をかけましょう。</p> 	<p>わきの下</p> <p>ムダ毛の長さを3～5mmにします。わきの下は、毛の生え方が複雑なので毛の伸びる方向を確かめて毛を抜くようにしてください。毛穴が深く太い場合は、蒸しタオル等で毛穴を開いてください。</p> 

脱毛の効果的なアドバイス

スルリと抜けなかったり、痛みがともなう場合、次のような原因が考えられます。


毛穴がしまっているとき

どうしても、最初のうちは、慣れていないので緊張したり、力が入ったりしますと、毛穴がしまってしまうので、毛根の処理ができていないのに毛穴が閉じ、スルリとぬけずに、痛みがともなうことがあります。こういう時は、蒸しタオルを当てて毛穴を開けるようにしてください。リラックスすることもうまく脱毛をするコツといえます。

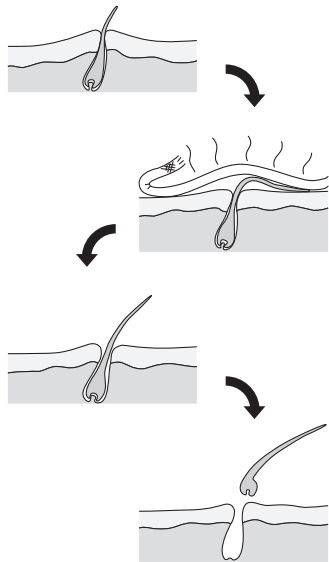

毛の深部が処理されていないとき

高周波脱毛器は、高周波エネルギーが毛幹を通して流れ、毛の深部に達します。但し、毛によって高周波エネルギーが流れにくく、処理ができません。こういった時は、毛穴から2～3mm伸びた、これから伸びようとしている毛でお試ください。

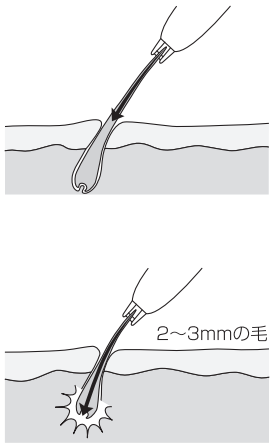

Q：プラソニエ「スタイルエピ100sakura」はどのように作用するのですか？

A：スタイルエピ100sakuraは高周波伝導ツイーザーから発する高周波エネルギーが、毛幹を通して毛の深部に伝わり、脱毛をすることができます。

Q：副作用はありませんか？


A：高周波による脱毛方法は、お肌に影響が少ない脱毛方法ですが、毛を抜く行為自体は、お肌に負担がかかります。お肌の敏感な方は、脱毛箇所が赤くなる場合があります。こういった場合でも1～2日で治りますが、万一お肌に異常があれば使用を止めてください。皮膚の角質形成が早く、再生毛を閉じ込めてしまう体質の方がごまれにありますが、本品でも同様なことがあればご使用を中止してください。

Q：生理中に使用できるのですか？

A：生理中は身体に負担をかけたくないものです。生理が終わってからご使用ください。

Q：なかなか抜けない毛があるのですか？


A：10ページの「脱毛の効果的なアドバイス」をご覧ください。それでもうまくいかないときは、当社お客様相談室へご連絡ください。

 0120-373-426

9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)

Q：ツイーザーで毛を抜くとき痛いのですが？

A：10ページの「脱毛の効果的なアドバイス」をご覧ください。それでもうまくいかないときは、当社お客様相談室へご連絡ください。

 0120-373-426

9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)

痛みの感覚は個人差があり、痛みを強く感じる方もおりますが、きちんと脱毛処理が行われていれば、ピンセットで抜くより痛みは少ないと思います。

Q：体のどの箇所でも使えますか？

A：はい。顔では、アゴ、マユ毛、口のまわり、髪の毛の生え際など、ボディでは、腕、脚、ワキの下、ビキニラインなどに使用可能です。マユ毛は、流行によって形が変わったりしますので充分ご注意ください。

「安全上のご注意」に書かれている箇所及び毛には絶対に使用しないでください。

Q：処理した後すぐにメイクをしても大丈夫ですか？

A：はい、大丈夫です。ただ、敏感肌の方や、お肌の弱い方は、目立たぬところで試してお肌に異常がないことを確認してから実施してください。

Q：男の人でもつかえますか？

A：もちろん大丈夫です。男性も女性と同じようにムダ毛の悩みがあります。脚、腕などは女性と同じようにできますが、ヒゲは太く、密集して生えているので、お肌に負担がかかりすぎお勧めはしませんが、ノドやホホ等に単独で生えているムダ毛の処理はできます。

本体のお手入れ方法

・本体が汚れたときは、やわらかい布で軽くふき、汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤を浸しよく絞ってから、汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。

※注意 シンナー、ベンジン、研磨剤の入った洗剤、化学ぞうきんは使用しないでください。

・ツイーザーの先端部の接続チップには皮膚から分泌された脂分が付着しますので、ご使用前にはきれいな布でふき取ってください。汚れがひどいときは、市販の消毒用アルコールをお使いください。

※本製品を廃棄される場合は、お住まいの各自自治体の指示に従い廃棄処分をしてください。地球環境のため、放置はしないでください。



外箱
内箱



内装

